

READY HEAT

体温維持用発熱シート レディヒート

手術

救急

救護

■ 麻酔導入前など、手術
■ 前後の体温管理に

■ 救急車で搬送時など
■ 緊急時の体温維持に



■ 災害現場での医療救護
■ などの万一の備えに

**レディヒートは開封すると発熱体が酸素と反応して発熱、
電源不要で持続が長く、体温管理や低体温対策に有効です**



医療目的で開発されたブランケットです

- ◆ 保温ではなく物理的に加熱する自己発熱式です
- ◆ 不織布のシートに発熱体が一体化されています
- ◆ バッテリー不要、大気中の酸素と反応して発熱します
- ◆ 最高温度まで約15~20分で加熱し10時間維持します
- ◆ 空気と水を通さない保護袋で個別密封されています
- ◆ 災害時などの電源喪失時の医療でも対応可能です
- ◆ 場所を選ばず保管でき救急車両での携行も容易です

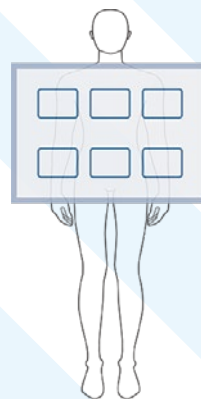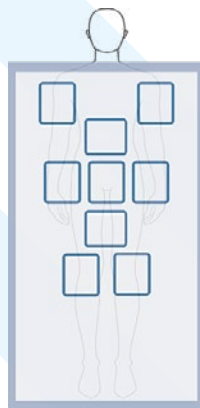

レディヒート製品輸入総代理店

INOX 東栄株式会社




レディヒートはアメリカで医療目的に開発された加温ブランケットです



TechTrade社のレディヒートは、外傷・ショック・低体温に対応するためにアメリカで開発された使い捨てポータブル加熱ブランケットです。独自にデザイン・製造されたオリジナル製品で、米軍・EMS※・山岳救助隊・水上救助隊・世界の病院で使用されています。※EMS:アメリカの救命救急医療(Emergency Medical Serviceの略称)


▶ 医療向けレディヒート ラインナップ ◀

フルボディブランケット 品番 SB9RH9120

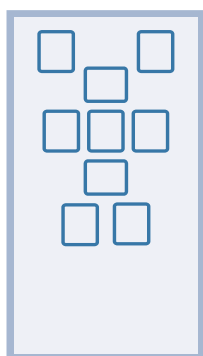

到達温度	40℃
到達時間	15~20分
持続時間	~10時間
使用時	86×152cm
重さ	510g
ご注文単位	1ケース(10個)
1個価格	7,600円(税別)

ハーフボディブランケット 品番 SB6RH9120

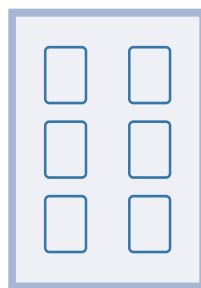

到達温度	40℃
到達時間	15~20分
持続時間	~10時間
使用時	60×86cm
重さ	350g
ご注文単位	1ケース(20個)
1個価格	6,300円(税別)

150cmの長さがあるため全身をカバーできます。医療向けのため上半身から下半身にかけて効果的に加温できる位置に発熱体が配置されています。手術前の麻酔導入前後の体温管理から手術直後の低体温からの回復まで、安定した加温が可能です。

上半身を覆うサイズで、用途に応じて縦向き・横向きなど、使いやすい向きでご利用いただけます。持続時間が長く、持ち運びやすさ、保管しやすさに優れているため、病院内だけでなく救急医療や災害医療の現場でも迅速な準備が可能です。

原材料:不織布、砂鉄、活性炭、塩分、水分、木粉 ※詳細はWebサイトをご覧ください labinox.co.jp/detail/medical-heat-blanket

上記以外にも製品ラインナップをご用意しております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

Manufactured By
TechTrade LLC In The U.S.A.



【ご注意】0℃以下の環境で開封した場合、発熱しない場合があります。0℃以下で使用する場合は0℃を上回る環境で開封し発熱を確認した後でご利用ください。低温環境下においても発熱条件を満たすように製造されているため、使用環境により到達温度や到達時間は変動します(変動幅:~約50℃)。持続時間の間は一定温度が継続するわけではなく、時間経過とともに温度はゆるやかに変動します。性能保証期間は製造から5年間となります。

仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。海外取り寄せ品のため納品までにお時間がかかります。掲載の数値などはメーカーによる基準値につき、ご使用条件により異なる場合があるため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。各種用途に応じて安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご利用ください。ご使用前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、安全を確認した上でご利用ください。不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応はいたしかねます。予めご理解のほどお願いします。製品には個体差があり同じ製品でも若干のサイズ誤差がございます。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。

お問い合わせは下記へ

レディヒート製品輸入総代理店
INOX 東栄株式会社
東京本社 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル)
TEL:03-5623-5681 FAX:03-5623-5682
大阪営業所 TEL:06-6908-4021 FAX:06-6906-1285
名古屋営業所 TEL:052-291-4782 FAX:052-291-4785
e-mail▶ inoxstaff@labinox.co.jp
U R L▶ <https://www.labinox.co.jp>

当資料はWeb公開用データのためチラシのご用意はございません。紙でご覧になりたい方はプリンターで印刷の上ご覧ください。